

# HomeChoice Automated PD System

Prepare for Therapy\*

pd



**1** Gather your supplies

- 1 – Solution Bags
- 2 – Drain Option
- 3 – Disposable Set
- 4 – Disconnect Cap(s)
- 5 – Face Mask(s)

Check solution bags for SEAL:

- Strength
- Expiration Date
- Amount
- Leaks



**2** Place a single solution bag on the heater pan

**WARNING:** The solution bag must cover the silver heater sensor button



**3** Turn on the cyclor

- Press the On/Off switch to the ON position
- Observe that all the characters on the display flash for several seconds
- Depending on your cyclor's programming, you may be asked to enter your weight and blood pressure
- The current mode (STANDARD MODE or LOW FILL MODE) appears for a few seconds
- When the system is ready, the screen displays PRESS GO TO START



**4** Prepare the disposable set

- Open the packaging by grasping the top and pulling down in opposite directions
- Close all clamps on the disposable set

**WARNING:** Inspect the cassette and tubing for damage



**5** Press GO when you are ready to begin

- LOAD THE SET appears



**6** Open the door

- Push the handle up to unlock and open the door



**7** Load the cassette

- The cassette only fits one way, with the lines leading to the right of the cyclor
- Close the door and press the handle down to lock the door



**8** Place the organizer

- Place the long slot of the organizer over the hook at the top of the door



**9** Attach your drain option

- For Drain Bag: Before attaching, ensure clamp is closed on the short tube with the blue pull ring to prevent leakage - OR -
- For Drain Line Extension: Leave the line clamp open and remove tip protectors from both ends of drain

**NOTE:** If you use a drain line extension or an integrated set, you must leave a space between the end of the drain line and any fluid in the drain or container




**10** Press GO

- SELF TESTING appears on the display screen
- When the self-test is complete, OPEN THE CLAMPS alternating with CONNECT BAGS appears on the display screen



**11** Put on face mask and wash and dry your hands thoroughly


**WARNING:** Follow aseptic technique taught by your dialysis center when handling lines and solution bags to reduce the possibility of infection

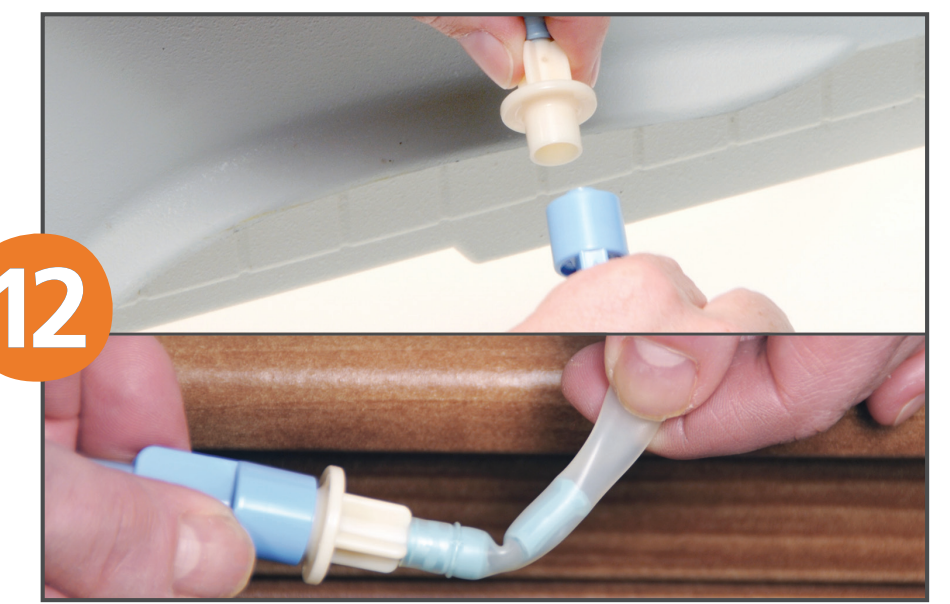

**12** Connect bags

- Connect the line with the RED clamp to the heater bag
- Connect the line with the BLUE clamp to the Last Fill bag
- Connect the lines with the WHITE clamps to additional solution bags, if needed
- Break the fragibles for all solution bags

**NOTE:** Do NOT stack the bags on top of one another. Place all bags on a flat surface. Ensure all lines are unknicked

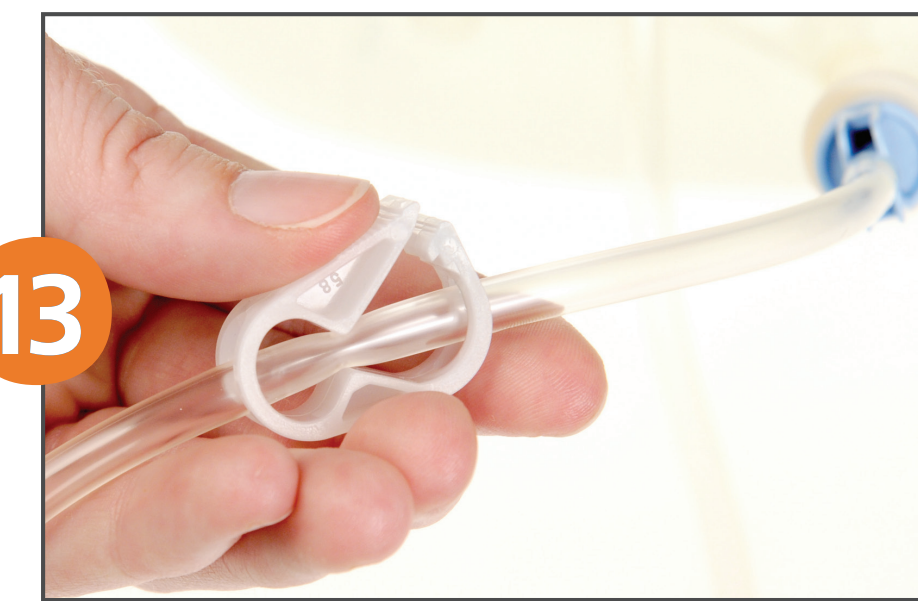

**13** Check connections and open clamps

- Open clamps only on lines connected to solution bags
- Make sure the patient line is in the left slot of the organizer
- Open the clamp on the patient line



**14** Press GO to begin priming

**WARNING:** Failure to open the clamp on the patient line will prevent the line from being primed, which can cause air to be delivered to you during FILL 1



**15** Priming complete. Check that the fluid level is at or near the connector on the patient line before connecting

- The display screen alternates between CONNECT YOURSELF and CHECK PATIENT LINE

**WARNING:** Verify that the fluid level is near the connector at the end of the patient line, or you may experience pain



**16** Get your transfer set ready

- Make sure your transfer set is available but do not remove the cap until after you have washed your hands



**17** Put on face mask and wash and dry your hands thoroughly

**WARNING:** Follow aseptic technique taught by your dialysis center when handling lines and solution bags to reduce the possibility of infection



**18** Connect yourself

- Remove the MiniCap from the transfer set
- Immediately connect the transfer set to the patient line by removing the pull ring and attaching the transfer set
- Open the transfer set



**19** After connecting yourself to the cyclor, press GO

- Treatment begins with INITIAL DRAIN

This procedural quick reference guide is a reference tool only and is not to be used as a comprehensive guide.

\*Rx Only. For complete instructions, including warnings and precautions, refer to the HomeChoice and HomeChoice Pro APD Systems Patient At-Home Guide.

# Sistema de DP automática HomeChoice

Preparación para el tratamiento\*

dp




Reúna sus suministros

- 1 - Bolsas de solución
- 2 - Opción de drenaje
- 3 - Juego desechable
- 4 - Tapa(s) de desconexión
- 5 - Mascarilla(s) facial(es)

Verifique las bolsas de solución siguiendo la sigla SEAL:

- Strength (concentración)
- Expiration Date (fecha de vencimiento)
- Amount (cantidad)
- Leaks (pérdidas)

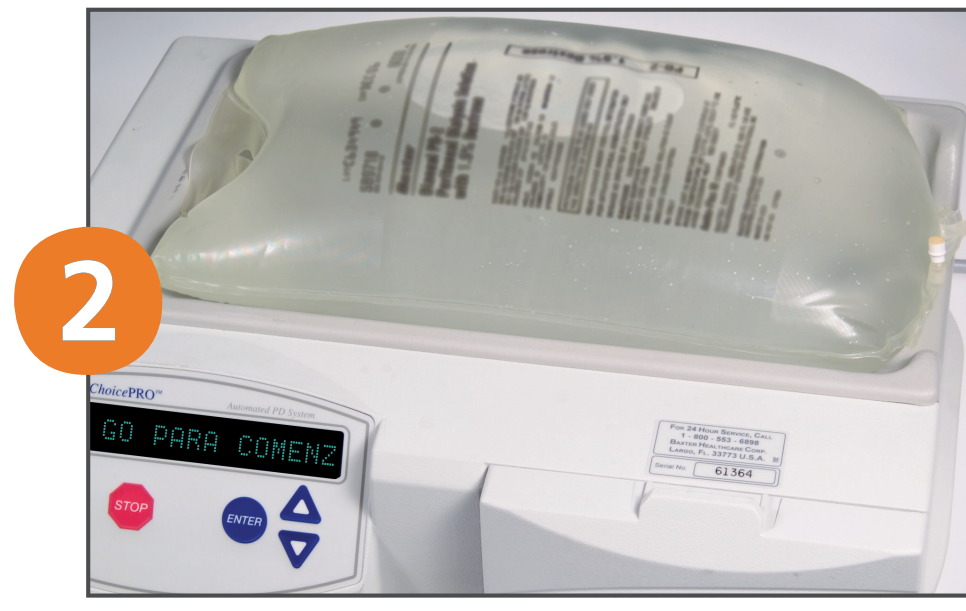

Coloque una sola bolsa de solución en la bandeja calentadora

**ADVERTENCIA:** La bolsa de solución debe cubrir el botón sensor plateado del calentador



Encienda la máquina cicladora

- Presione el interruptor de encendido/apagado para encenderla
- Observe que todos los caracteres de la pantalla parpadeen durante varios segundos
- Dependiendo del programa de su máquina cicladora, es posible que se le pida que ingrese su peso y presión arterial
- El modo actual "MODO: STANDARD o MODO: VOLUM. PEQUEÑO" aparece durante algunos segundos
- Cuando el sistema está listo, la pantalla muestra "PULSE GO PARA COMENZ"



Prepare el juego desechable

- Abra el paquete tomando la parte superior y tirando en direcciones opuestas
- Cierre todas las pinzas del juego desechable

**ADVERTENCIA:** Verifique que el cartucho y la tubería no estén dañados



Pulse GO para comenzar cuando esté listo

- Aparece "CARGA DEL CASSETTE"



Abra la puerta

- Empuje el mango hacia arriba para destrabarlo y abra la puerta



Cargue el cartucho

- El cartucho sólo calza de una forma, con las líneas hacia la derecha de la máquina cicladora
- Cierre la puerta y presione el mango hacia abajo para trabar la puerta



Coloque el organizador

- Coloque la ranura larga del organizador sobre el gancho que se encuentra en la parte superior de la puerta



Conecte su opción de drenaje

- Para la bolsa de drenaje: Antes de conectar, asegúrese de que la pinza esté cerrada en la tubería corta con la anilla azul para evitar goteras - O -
- Para la extensión de la línea de drenaje: Deje abierta la pinza de la línea y quite los protectores de ambos extremos del drenaje

**NOTA:** Si usa una extensión de la línea de drenaje o un juego integrado, debe dejar un espacio entre el extremo de la línea de drenaje y cualquier líquido del drenaje o recipiente



Pulse GO para comenzar

- Aparece "AUTO COMPROBACION..." en la pantalla
- Al finalizar la auto comprobación, aparece "ABRA LAS PINZAS" alternando con "CONECTE LAS BOLSAS" en la pantalla de visualización



Colóquese la mascarilla facial y lávese y séquese bien las manos


**ADVERTENCIA:** Siga la técnica aséptica que le enseñaron en su centro de diálisis cuando manipule líneas y bolsas de solución para reducir la posibilidad de infección



Conecte las bolsas

- Conecte la línea con la pinza ROJA a la bolsa calentadora
- Conecte la línea con la pinza AZUL a la última bolsa de llenado
- Conecte las líneas con las pinzas BLANCAS a bolsas de solución adicionales, si fuera necesario
- Rompa los frangibles para todas las bolsas de solución

**NOTA:** NO apile las bolsas una sobre otra. Coloque todas las bolsas en una superficie plana. Asegúrese de que ninguna de las líneas esté retorcida

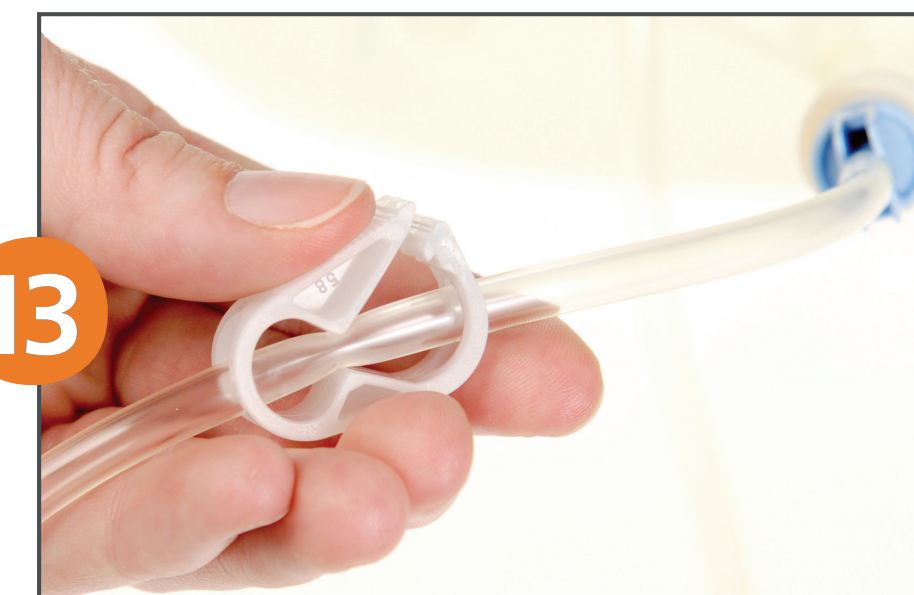

Verifique las conexiones y las pinzas abiertas

- Abra sólo las pinzas de las líneas conectadas a bolsas de solución
- Asegúrese de que la línea del paciente esté en la ranura izquierda del organizador
- Abra la pinza de la línea del paciente



Pulse GO para comenzar a cebar

**ADVERTENCIA:** No abrir la pinza de la línea del paciente evitará que la línea se ceba, lo cual puede hacer que se le administre aire a usted durante el LLENADO 1.



Cebado finalizado. Verifique que el nivel de fluido esté en o cerca del conector de la línea del paciente antes de conectar.

- La pantalla de visualización alterna entre "CONÉCTESE" y "REVISE LINEA PACIENT"

**ADVERTENCIA:** Verifique que el nivel de fluido esté cerca del conector en el extremo de la línea del paciente; de lo contrario, podría sentir dolor



Prepare su juego de transferencia

- Asegúrese de que su juego de transferencia esté disponible pero no quite la tapa hasta después de haberse lavado las manos



Colóquese la mascarilla facial y lávese y séquese bien las manos

**ADVERTENCIA:** Siga la técnica aséptica que le enseñaron en su centro de diálisis cuando manipule líneas y bolsas de solución para reducir la posibilidad de infección



Conéctese

- Quite la tapa MiniCap del juego de transferencia
- Conecte inmediatamente el juego de transferencia a la línea del paciente quitando la anilla y conectando el juego de transferencia
- Abra el juego de transferencia



Luego de conectarse usted mismo a la máquina cicladora, pulse GO

- El tratamiento comienza con "DRENAJE INICIAL"

Esta guía de referencia rápida del procedimiento es únicamente una herramienta de referencia y no debe ser utilizada como guía exhaustiva.

\*Únicamente con receta médica. Para obtener instrucciones completas, incluyendo advertencias y precauciones, consulte la guía para pacientes en el hogar de los sistemas de DPA HomeChoice y HomeChoice Pro.