

中心发生紧急情况


如果您在透析期间发生紧急情况：

- 保持冷静
- 等待工作人员的指示
- 如果工作人员无法提供帮助，请按照以下步骤夹住并断开您的输血管
- 寻找最近的出口；可能不是您进来的门
- 离开中心并在外面汇合
- 此时工作人员即可为您取针


如果透析期间停电

- 可以一直用曲柄转动机器直到恢复供电，或者用曲柄转动足够长时间以回输血液并停止治疗
 - 工作人员将取下机器背面的曲柄，并将其连接至血泵
 - 曲柄应每 4 秒钟转动一周
- 如果您有能力，工作人员可能会让您自行转动机器的曲柄，这样他们就能帮助无法自行转动曲柄的患者

紧急情况下夹住并断开步骤

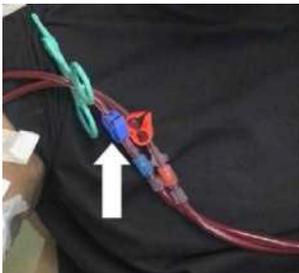

第 1 步 在通道针上的**红色**和**蓝色**连接点前夹上两个夹子。

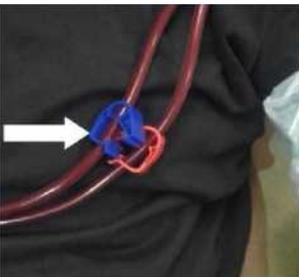

第 2 步 在连接血液透析机的厚管上夹上两个夹子。



第 3 步 扭转**红色**和**蓝色**连接点处两组闭合夹子之间的输血管。